


SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN
RESPIRATORIA

850

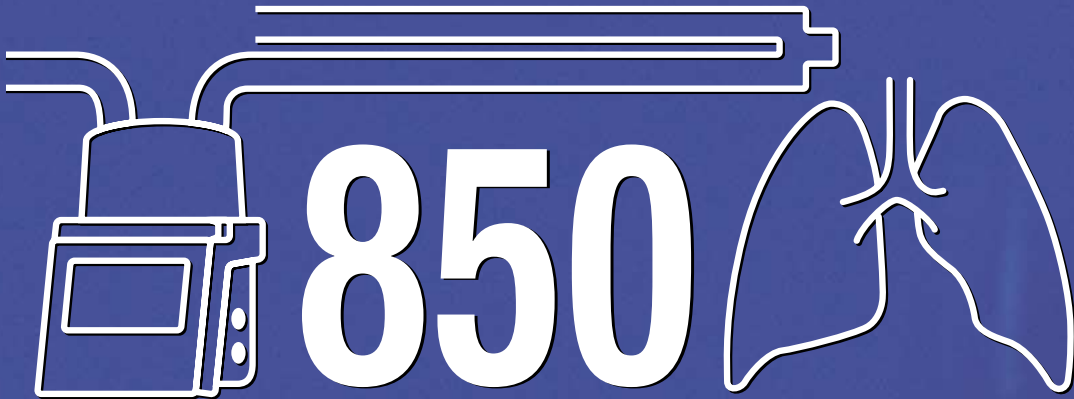


SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN
RESPIRATORIA

HUMIDIFICADOR MR850	CIRCUITO DUAL CALENTADO Y CÁMARA DE AUTO-ALIMENTACIÓN MR290	SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN 850
Tensión de Alimentación 230±20 V 115 V 100±10 V	Volumen comprimible 1,48 l	Rango de flujo para obtener la humidificación óptima (modo invasivo) 3 l/min – 60 l/min
Frecuencia 50/60 Hz	Compliance 5mL kPa ⁻¹ m ⁻¹	Tiempo de precalentamiento <30 minutos
Uso máximo de corriente 210 W	Pico máximo de flujo 180 l/min	
	Resistencia al flujo Cámara: 2 cm H ₂ O a 123 l/min Rama inspiratoria: 2 cm H ₂ O a 49 l/min	
	Tamaño de los conectores Hembra de 22 mm para los conectores de ventilador inspiratorios y espiratorios, y pieza en Y hembra de 15 mm	

Advertencia: El uso, en conjunción con el humidificador MR850, de circuitos respiratorios, cámaras y otros accesorios que no estén aprobados por Fisher & Paykel pueden afectar el funcionamiento o comprometer la seguridad.

INTERNATIONAL P.O.Box 14-348, Panmure, Auckland 6, New Zealand Tel: +64-(0)9-574 0100 Fax: +64-(0)9-574 0158 Email: info@fphcare.com Web Site: www.fphcare.com
AUSTRALIA Tel: +61-(0)3-9879 5022 Fax: +61-(0)3-9879 5232 FRANCE/BENELUX Tel: +33-(0)1-64 46 52 01 Fax: +33-(0)1-64 46 52 21
GERMANY/AUSTRIA Tel: +49-(0)7182-93777-0 Fax: +49-(0)7182-93777-99 UK/IRELAND (EU Authorised Representative) Tel: +44-(0)1628-626 136 Fax: +44-(0)1628-626 146
USA Tel: 1800 446 3908 or +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933

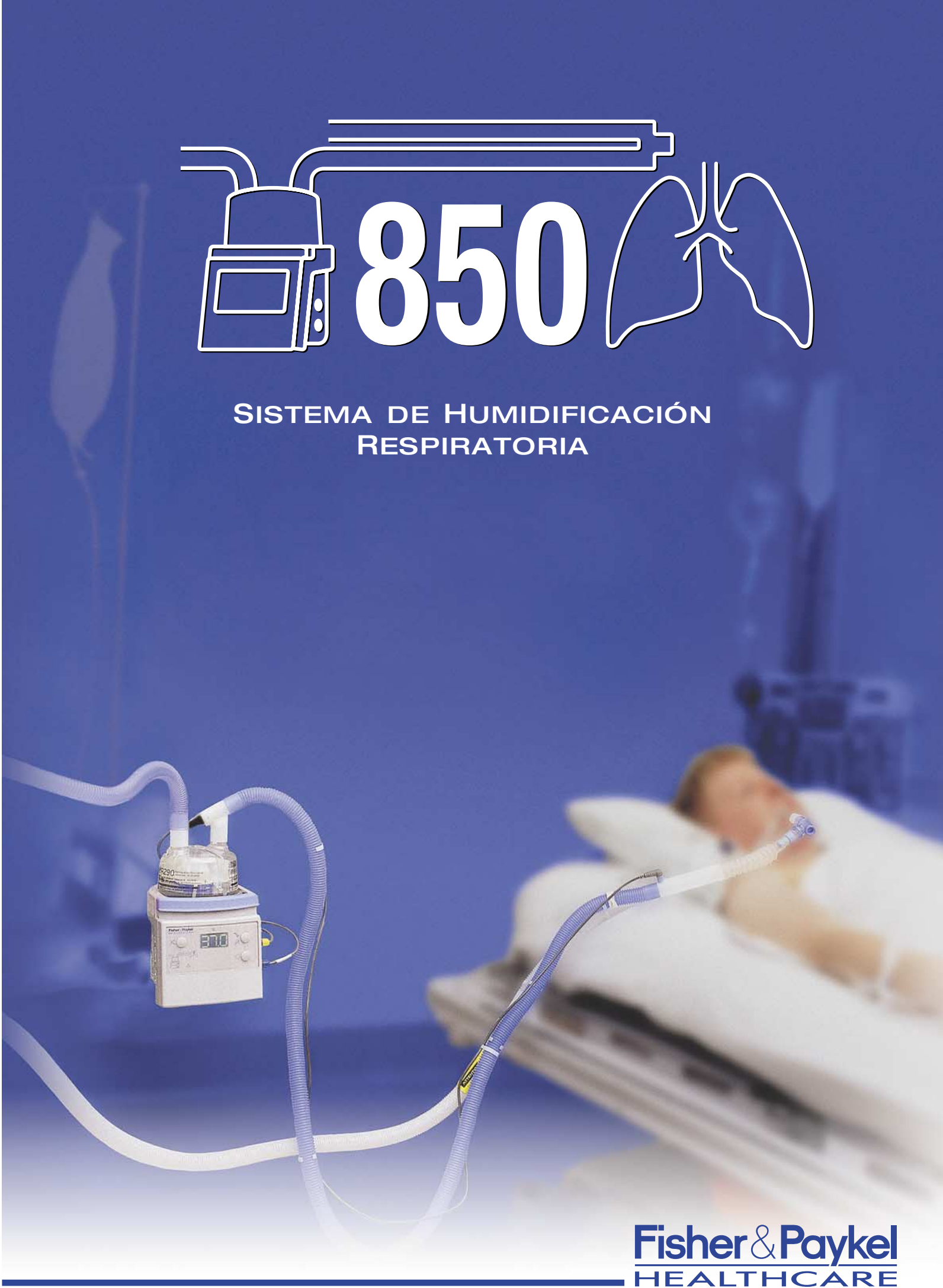

LA HUMIDIFICACIÓN ÓPTIMA

El suministrar gases con un nivel óptimo de humidificación a pacientes en condiciones críticas mantiene la calidad de las secreciones, fomenta el intercambio de gases y reduce los riesgos de infecciones.

HUMIDIFICADOR

- Controles simples y pantalla de fácil lectura
- Un botón selecciona la temperatura y el nivel de humidificación óptimos para terapias invasiva y no invasiva
- Utiliza algoritmos avanzados para optimizar el suministro de humidificación y evitar alarmas molestas

CÁMARA

- Apropia para todo tipo de pacientes – de neonatos a adultos
- Mantiene automáticamente el nivel del agua
 - mantiene la PEEP (presión positiva al final de la espiración)
 - reduce la necesidad de mantenimiento del circuito
 - mantiene una humidificación óptima
- Complianza y volumen comprimible constante

CIRCUITO

- Alambres calentadores en espiral exclusivos minimizan el condensado móvil y reducen la necesidad de mantenimiento del circuito
- Puerto MDI (inhalador de dosis controlada) para un rápido suministro de medicamentos en aerosol
- Ligero – tira menos del tubo endotraqueal
- Pre-embalado – rápido y fácil de instalar