



[Rendimiento Excepcional]

En un Rango Mayor de Tejidos y Aplicaciones



Cargas Endo GIA™
con Tecnología Tri-Staple™
y Grapadora Endo GIA™ Universal Ultra



COVIDIEN

positive results for life™

Cargas Endo GIA™ con Tecnología Tri-Staple™ y Grapadora Endo

La Tecnología Tri-Staple™ proporciona a las cargas de Endo GIA™ una funcionalidad excelente a través de un rango más amplio de grosor de tejido, a la vez que simplifica la selección de cartucho.

YUNQUE MÁS ROBUSTO, AERODINÁMICO Y FIJO

- Mejora la maniobrabilidad de la grapadora a través del tejido
- Mejora la fuerza de clampado
- Proporciona una formación de la grapa en forma de B más consistente
- Yunque fijo más robusto para asegurar un buen contacto entre las dos mandíbulas

ORIFICIOS DEL CARTUCHO MAYORES

- Aumenta el área de orientación para facilitar una buena formación de la grapa, especialmente con tejido grueso
- Facilita la formación consistente de la grapa en forma de B para proporcionar una seguridad óptima en la línea de grapas

CUCHILLA MÁS DURA Y CON DISEÑO DEL EJE CENTRAL MEJORADO

- Transección más suave del tejido en espesores de tejido más exigentes
- Aumento de la compresión durante el disparo
- Cuchilla nueva y estéril en todos los disparos

SUPERFICIE ESCALONADA DEL CARTUCHO

- Facilita la difusión lateral de los tejidos durante el clampado y el disparo
- Minimiza la extrusión del tejido distal
- Requiere menor fuerza para comprimir el tejido
- Permite un aumento de la perfusión sanguínea en la línea de corte

CUATRO GRAPAS EN LA PARTE DISTAL DEL CARTUCHO

- Aumenta la línea de seguridad de grapas sobre los tejidos transeccionados parcialmente



do GIA™ Universal Ultra

VARIAS ALTURAS DE GRAPAS

- Facilita el uso sobre un mayor rango de grosor de tejido
- Mejora la presión de rotura (resultados procedentes del banco de pruebas)
- Reduce la tensión de la compresión del tejido sobre la línea externa de grapado comparado con Endo GIA™ Universal Roticulator™ y cargas rectas (para resultados procedentes del banco de pruebas)
- Proporciona un cierre de grapa más ajustado sobre la línea de grapado interna cerca de la línea de corte

TOTAL COMPATIBILIDAD

- La nueva grapadora Endo GIA™ Universal Ultra puede usarse con todas las nuevas cargas Endo GIA™ con tecnología Tri-Staple™ y con las ya existentes cargas Rectas, Roticulator™ y DUET TRS™
- Simplifica la gestión de inventarios durante la transición a los dispositivos de nueva tecnología



TRES LONGITUDES DE EJE

- Corto (6cm), Standard (16cm) y XL (26cm) ofrece una mayor flexibilidad en su uso en procedimientos específicos



CARGA ÚNICA CON PUNTA CURVA

- Proporciona a los cirujanos una mayor visualización y acceso a la zona quirúrgica
- Mejora la disección y manipulación del tejido y los vasos en las aplicaciones de grapado más exigentes
- Incluye un introductor flexible

La nueva grapadora Endo GiA™ Universal Ultra (corta, standard y XL) combina un diseño ergonómico, articulación precisa y maniobrabilidad con una sola mano para aumentar la versatilidad y mejorar la experiencia de uso.

MANECILLA DE ARTICULACIÓN MEJORADA

- Proporciona un acceso preciso e intuitivo a las zonas quirúrgicas y flexibilidad de aproximación al tejido/vaso a través de 10 posiciones de articulación (5 de cada lado) y posición neutral
- Articulación del mango y la carga en la misma dirección

DISEÑO ERGONÓMICO

- Agarres suaves sobre el mango y manecilla de articulación que mejoran ergonomía y aumentan el control del cirujano



- Mecanismo de Descarga Mejorado



- Indicador de Carga Incorrecta

MECANISMO DE AGARRE CON UNA SOLA MANO

- Agarra y libera el tejido presionando la palanca hacia delante o hacia atrás
- El mecanismo de agarre de la grapadora Endo GiA™ Universal Ultra reduce el uso de otros sistemas de agarre durante el procedimiento quirúrgico (cuando se compara con la grapadora Endo GiA™ Universal)

CORTO ALCANCE

- Menor distancia entre la palanca y el mango inmóvil
- Facilita el uso de la grapadora para cirujanos con la mano pequeña



Sistema de Gestión de Compresión del Tejido


La capacidad para trabajar en un rango mayor de tejidos y simplificar el proceso de selección de cargas han sido durante mucho tiempo necesidades críticas de muchos cirujanos. En respuesta, Covidien se complace en presentar una innovadora tecnología de grapado - Cargas Endo GIA™ con Tecnología Tri-Staple™ y Grapadora Endo GIA™ Universal Ultra.

Covidien ofrece ahora la grapadora con mayor flexibilidad del mercado en función del grosor de tejido. Con dos únicas cargas de Endo GIA™ con tecnología Tri-Staple™ se abarca un rango de grosor de tejido mayor que el cubierto por cuatro cargas de Echelon™*.

TABLA DE SELECCIÓN DE CARGAS					
Tejido Extra Fino	Tejido Fino	Tejido Mediano		Tejido Grueso	Tejido Extra Grueso
Vascular					
Cargas Endo GIA™ sin Tecnología Tri-Staple™					
2.0mm	2.5mm	3.5mm		4.8mm	
puerto 12mm		puerto 15mm			
Cargas Endo GIA™ con Tecnología Tri-Staple™					
Extra Fino/ Vascular ¹		Vascular/Mediano		Mediano/Grueso	Extra Grueso
puerto 12mm		puerto 15mm			
Ethicon Echelon™/cargas ETS					
Fino/Mesentérico	Vascular/Fino	Regular	Regular/Grueso	Grueso	
puerto 12mm					

¹ Los resultados del banco de pruebas no se pueden correlacionar directamente con el rendimiento clínico.

PERFIL DE COMPRESIÓN DEL TEJIDO

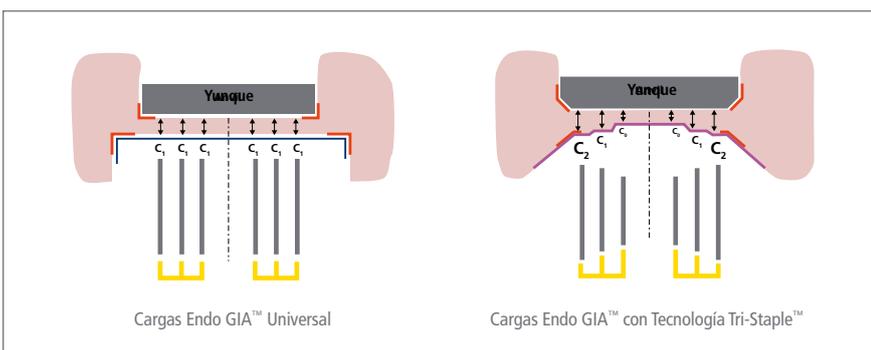

- Tecnología Tri-Staple™ está diseñada para producir una compresión tisular escalonada

Información de Pedido

Cargas Endo GIA™ con tecnología Tri-Staple™

Referencia	Descripción	Color Cartucho	Altura Grapa (Línea de Interior a Exterior)
EGIA45AV*	Endo GIA™ 45mm Carga Articulada Vascular	■ Gris	2mm, 2mm, 2mm
EGIA30AVM	Endo GIA™ 30mm Carga Articulada Vascular/Media con tecnología Tri-Staple™	■ Beige	2mm, 2.5mm, 3mm
EGIA45AVM	Endo GIA™ 45mm Carga Articulada Vascular/Media con tecnología Tri-Staple™	■ Beige	2mm, 2.5mm, 3mm
EGIA60AVM	Endo GIA™ 60mm Carga Articulada Vascular/Media con tecnología Tri-Staple™	■ Beige	2mm, 2.5mm, 3mm
EGIA30AMT	Endo GIA™ 30mm Carga Articulada Media/Gruesa con tecnología Tri-Staple™	■ Púrpura	3mm, 3.5mm, 4mm
EGIA45AMT	Endo GIA™ 45mm Carga Articulada Media/Gruesa con tecnología Tri-Staple™	■ Púrpura	3mm, 3.5mm, 4mm
EGIA60AMT	Endo GIA™ 60mm Carga Articulada Media/Gruesa con tecnología Tri-Staple™	■ Púrpura	3mm, 3.5mm, 4mm
EGIA45AXT	Endo GIA™ 45mm Carga Articulada Extra Gruesa con tecnología Tri-Staple™	■ Negra	4mm, 4.5mm, 5mm
EGIA60AXT	Endo GIA™ 60mm Carga Articulada Extra Gruesa con tecnología Tri-Staple™	■ Negra	4mm, 4.5mm, 5mm

Cargas Endo GiA™ con Tecnología Tri-staple™ con Punta Curva

Referencia	Descripción	Color Cartucho	Altura Grapa (Línea de Interior a Exterior)
EGIA45CTAV*	Endo GiA™ 45mm Carga con punta Curva Articulada Vascular	■ Gris	2mm, 2mm, 2mm
EGIA30CTAVM	Endo GiA™ 30mm Carga Articulada Vascular/Media con Tecnología Tri-Staple™ con Punta Curva	■ Beige	2mm, 2.5mm, 3mm
EGIA45CTAVM	Endo GiA™ 45mm Carga Articulada Vascular/Media con Tecnología Tri-Staple™ con Punta Curva	■ Beige	2mm, 2.5mm, 3mm
EGIA60CTAVM	Endo GiA™ 60mm Carga Articulada Vascular/Media con Tecnología Tri-Staple™ con Punta Curva	■ Beige	2mm, 2.5mm, 3mm
EGIA60CTAMT	Endo GiA™ 60mm Carga Articulada Media/Gruesa con Tecnología Tri-Staple™ con Punta Curva	■ Púrpura	3mm, 3.5mm, 4mm

*Las referencias EGIA45AV y EGIA45CTAV, son cargas vasculares con yunque más firme y fijo, pero no integran Tecnología Tri-Staple™

Información de Pedido

Producto	Referencia	Longitud del Eje	Descripción
	EGIAUSHORT	6cm	Endo GIA™ Universal Ultra - Grapadora Corta
	EGIAUSTND	16cm	Endo GIA™ Universal Ultra - Grapadora Corta
	EGIAUXL	26cm	Endo GIA™ Universal Ultra - Grapadora XL

IMPORTANTE

Por favor consulte las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones de uso.



COVIDIEN, COVIDIEN con logo, Covidien logo y "positive results for life" son US y/o internacional marcas registradas de Covidien AG. Otras marcas por ™ son marcas registradas por Covidien company. ™* marcas de su respectiva propiedad. © 2010 Covidien. - M100743a ES - 08/2010

Para más información o para organizar una demostración de producto, contacte con su representante local de Surgical Devices o bien contacte con el servicio de atención al cliente de Covidien.

COVIDIEN
SPAIN S.L.

c/FRUCTUÓS GELABERT
6, 8ª PLANTA
08970 SANT JOAN DESPÍ
BARCELONA

+34 91 275 48 54 [T]
+34 91 275 48 55 [F]

WWW.COVIDIEN.COM